



ATTENZIONE. Conservare le istruzioni



- I maniglioni mobili sono progettati per sostenere il movimento naturale es: come assistenza per alzarsi in piedi. Non sono progettati per sopportare l'intero peso corporeo. Siete pregati di osservare le specifiche contenute nelle istruzioni e riportate sui maniglioni riguardanti la portata massima
- Prima di ogni utilizzo del maniglione mobile, è necessario osservare l'indicatore di sicurezza e seguire le istruzioni
- Al fine di evitare danni/lesioni causate da un utilizzo scorretto e potervi assicurare un uso ottimale del prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni e note prima dell'utilizzo del dispositivo. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro e/o trasmissione ad altri utenti. Se avete domande aggiuntive o problemi, per favore contattate il vostro distributore.



Premere saldamente il maniglione sul muro. In questo modo si garantisce che il disco di gomma si appiattisca, e che l'aria residua possa fuoriuscire completamente



Premere contemporaneamente il maniglione contro la superficie a cui deve aderire, e la leva per creare il sottovuoto



Girare la prima leva e successivamente la seconda

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso !




Tienilo sempre sotto controllo per la tua sicurezza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'INDICATORE DI SICUREZZA!

Modalità di funzionamento della leva di sicurezza Mobeli: la forza di aderenza è costantemente monitorata.



Sicurezza completa per la tolleranza massima di peso (Fig. 1+2)

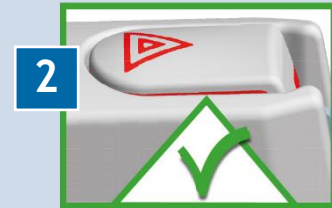

Attenzione: il maniglione deve essere staccato e riattaccato immediatamente! La tenuta del maniglione è ridotta. L'utilizzo del maniglione non è più consentito per il peso massimo utilizzatore. È ancora presente una forza di presa ridotta. (Fig.3+4)



Se il maniglione resta attaccato su una superficie solida e non porosa per un lungo periodo di tempo, i dischi in gomma diventeranno più tesi e ricurvi (Fig.5)

Noi pertanto raccomandiamo di rimuovere il maniglione dalla superficie ogni 14 giorni e lasciarlo riposare tutta la notte su una superficie piana con le leve rilassate e di riattaccarlo la mattina successiva.

Quando riattaccate il maniglione è importante spingere le leve fermamente contro la superficie

Se l'indicatore di sicurezza viene spinto verso l'esterno più velocemente del solito nello stesso punto dove avete già fissato in precedenza il maniglione, vi raccomandiamo di pulire la zona.

Se i dischi in gomma sono estremamente sovraccaricati e usurati, dovrebbero essere sostituiti. Per questo contattate il vostro rivenditore.

Se l'indicatore di sicurezza resta alzato anche dopo aver girato le leve, e rimane sporgente anche dopo averle permutate nuovamente, il maniglione deve essere staccato e riattaccato

Se l'indicatore di sicurezza è sporgente nella misura indicata (Fig 3+4).

ATTENZIONE! La maniglia non deve essere usata ulteriormente. **Rischio di incidente!**